

Roll-A-Ramp® to jedno z najbardziej pomysłowych rozwiązań na świecie. Lekka, aluminiowa i jednocześnie mocna oraz bezpieczna konstrukcja.


Roll-A-Ramp® to rampa, zwana również najazdem wykonany ze wzmocnionego aluminium wykorzystywanego w lotnictwie.

Roll-A-Ramp to połączenie najnowocześniejszej technologii z opracowanym patentem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Rampa jest laureatem prestiżowej nagrody „Product of the Year”.



Stworzona z myślą o niepełnosprawnych rampa wykonana z modułów połączonych ze sobą śrubami z samo kontrującymi się nakrętkami. Dzięki takiemu połączeniu rampa po rozłożeniu usztywnia się tworząc bezpieczny pomost umożliwiający swobodny najazd lub zjazd osoby na wózku inwalidzkim.

Dodatkowo rampa posiada antypoślizgową powierzchnię odporną na wszelkie warunki atmosferyczne, śnieg, deszcz, mróz. Daje to swobodę używania wewnątrz jak i na zewnątrz bez wpływu na jakość użytkowania.

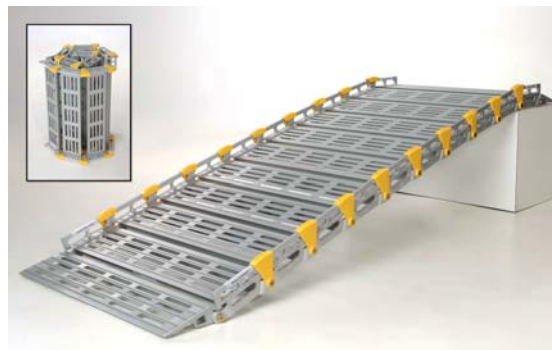

Użytkowanie i obsługa

Jej modułowa konstrukcja sprawia, że możliwe jest wykonanie rampy o dowolnej długości zgodnych z zapotrzebowaniem użytkownika. Składa się z modułów początkowych, na które wózek najjeżdża w pierwszej kolejności oraz z modułów wewnętrznych. Moduły te są specjalnie wyprofilowane tak aby podczas najazdu rampa była w pozycji poziomej.

Oprócz tego rampę można dowolnie wydłużyć, skrócić a nawet podzielić gdy zajdzie taka potrzeba. Daje to praktycznie nieskończone możliwości i pozwala na dokładne dopasowanie do konkretnych potrzeb użytkownika.



Każda rampa posiada moduły początkowe i moduły wewnętrzne, dzięki temu może być wykonana w każdej długości.

Uniwersalne zastosowanie Roll-A-Ramp:

- podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich manualnych i z napędem
- idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się samochodowym transportem osób niepełnosprawnych
- możliwość używania przez firmy zajmujące się obsługą imprez i koncertów
- narzędzie dla firm budowlanych i remontowych
- oraz wiele innych zastosowań

Żółte przykrywy bezpieczeństwa, element, który chroni przed zranieniem podczas składania i rozkładania.



Zalety Roll-A-Ramp:

- szybko się składa i rozkłada
- lekka i łatwa w transporcie
- może być złożona w dowolnej długości i można ją dzielić
- użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne
- bezpieczna w użytkowaniu
- dostępność akcesoriów, np. poręcz



Powierzchnia antypoślizgowa wszystkich modułów i odporna na warunki atmosferyczne.



Szerokości Roll-A-Ramp®

122cm

Największa z dostępnych szerokości Roll-A-Ramp®. Idealnie nadaje się do instalacji stałych.

91,44cm

Komfortowa szerokość dla dużych wózków inwalidzkich oraz szerokich skrzyń transportowych typu „case”.

Najczęściej wybierana do transportu wózków z napędem oraz przez firmy zajmujące się obsługą imprez okolicznościowych i koncertów.

76,20cm

Uniwersalna szerokość dla standardowych wózków inwalidzkich. Kompaktowa, używana tam, gdzie nie ma szerokich wjazdów, np.: drzwi lub próg mieszkania.

66,04cm

Wąska szerokość wykorzystywana do ciasnych pomieszczeń, schodów. Wybierana do samochodów typu bus, van i innych tego typu pojazdów.

33,50cm

Specjalna szerokość opracowana do użytku parami dla bardzo ciężkich wózków z szerokim rozstawem osi oraz dla pojazdów samobieżnych typu quad, skuter, itp.



Wąskie rampy 30,5cm są używane w parach. Nieduża waga i kompaktowy rozmiar stanowi idealne rozwiązanie do transportu nawet w niedużym samochodzie osobowym.



Długości Roll-A-Ramp®

Wszystkie długości Roll-A-Ramp są aktualnie dostępne. Doradzimy jaką długość będzie Ci potrzebna. Wystarczy podać wysokość schodów, podium, itp. a my poinformujemy jaką rampę należy zastosować. Dłuższe rampy wymagają specjalnych podpór, które wspomagają stabilność rampy na niestabilnym podłożu.

Przykładowe nachylenie najazdu do zastosowań:

- nachylenie między 6% a 10% - dla wózków manualnych
- nachylenie między 12% a 20% - dla wózków manualnych z asekuracją
- nachylenie poniżej 20% - dla wózków z napędem i skuterów

